

Comment poser le capteur ?

TESTER VOTRE QUALITE DE SOMMEIL




Clipper la première électrode neuve



Clipper la deuxième électrode neuve



Enlever la protection de l'autocollant de chaque électrode

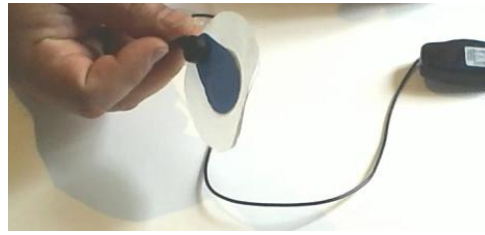

Placer l'électrode libre sur la bas ventre coté gauche comme sur la photographie



Placer l'électrode fixée avec le capteur au niveau pectoral coté droit



Appuyer sur le bouton du capteur pour la mise en marche avant de se coucher, l'appareil clignote durant l'enregistrement.



Après une nuit de sommeil, appuyer durant 5 secondes sur le bouton du capteur afin de l'arrêter avant de déclipper les électrodes autocollantes jetables. Le capteur ainsi que le câble est à retourner au plus vite au centre.



Le dispositif est résistant aux éclaboussures d'eau cependant vous devez éviter toute humidification du dispositif.



Le dispositif doit être hors de la portée des enfants de 0 à 6 ans et des animaux.